



TRIM ION
GRACIA

混合水栓一体型電解水素水整水器 トリムイオン グラシア - L型 -

キッチンの新しい
美しさを創造する。
ハンドシャワー付
マルチ水栓。

TRIM ION
GRACIA



トリムの整水技術と
ドイツ・グローエ社の
デザイン哲学が
高次元で融合。



GROHE
ENJOY WATER®

グローエは「水の哲学」をデザインします。

グローエ社は1936年にドイツに誕生した、ヨーロッパ最大の水栓金具メーカーです。自社内にデザインセンターを有しており、その傑出したフォルムは、水栓の機能を熟知したインハウスデザインチームが創造する不朽のデザインとして世界的な賞賛を受け、全世界150カ国で愛用されています。美しさ、使いやすさ、耐久性のいずれにおいても、グローエ独自のものづくりの哲学が息づいています。

混合水栓一体型電解水素水整水器
(アンダーシンク型)

TRIM ION GRACIA
トリムイオン グラシア - L型 -

効果/胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

医療機器製造販売認証番号: 224AGBZX00024000
本器は医薬品医療機器等法(旧薬事法)第2条第4項の
政令で定める医療機器であり、第6項の管理医療機器です。


ご使用上の注意

- 飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。
- 腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




操作は画面に触れるだけ カンタン!タッチパネル

●起動時 表示画面

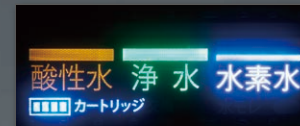

●カートリッジ交換表示画面

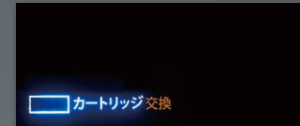

●電解水素水画面



タッチパネルと音で
操作状況が
確認できます。


タッチパネルの中央に触
れると取水モード選択画
面が表示されます。取水
モードをタッチして整水ハ
ンドルをまわせば、選択し
た水が得られます。

● 水素水画面／表示にタッチする
と、水素水表示が青色に点灯しま
す。さらに水素水表示をタッチする
と水素レベル表示に切替わり、3 段
階までレベルを調節することがで
きます。メロディが鳴り始めると、
電解水素水が取水できます。



● 浄水画面／表示にタッチする
と、浄水表示が緑色に点灯します。
水が出て 2、3 秒してから浄水が
出始めます。

●酸性水画面

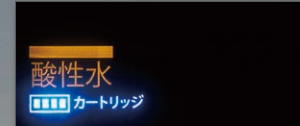

● 酸性水画面／表示にタッチする
と、酸性水表示がオレンジ色に
点灯します。ブザー音が鳴ると、
安定した酸性水が取水できます。

ウォーターヘルスケアという
新習慣を身近にします。

1つの水栓で必要に応じて4つの水を使い分
ける。赤ちゃんからご年配の方まで、飲み水やお
料理、野菜洗浄や食器などの洗い物まで、用途
に応じて必要な水を利用できます。健康
には「身体にいい水が大切」とお考えなら、トリム
イオングラシアをぜひ暮らしにお役立てください。

1つの水栓で4つの水を

電解水素水

1 電解水素水は、水道水に含まれる塩素や鉛などを
除去し、さらに電気分解することによって陰極側
に生成される水素を含んだアルカリ性のお水で
す。生成後、白く小さい気泡が発生しますが、これ
は電気分解によって生成された水素の気泡です。
そのままお飲みください。また、胃腸症状の改善
に効果がありますので、毎朝のお通じなど気にな
る方はぜひお試しください。

浄水

2 水道水に含まれる不純物22物質が除去されたお水です。
赤ちゃんのミルクや薬の服用などにお使いください。

酸性水

3 お肌に近い弱酸性のお水です。
食器などの洗浄にお使いいただけます。

水道水

4 浄水や電気分解の必要がないときは
一般の水道水としてご使用ください。

※当社は、電気分解して陰極から生成される水素を含んだ
アルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を電解水素水、
陽極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます。

■レベル別pH値目安


モード	酸性水	浄水	水素水		
レベル	—	—	1	2	3
用途	洗浄用	飲用	飲用	飲用	調理用
pH目安	3.5～5.5	電解なし	8.0～9.5	8.5～9.9	9.0～10.5

※pH値はあくまでも目安であり、地区の水質により数値に変動があります。

WATER HEALTH CARE

PREMIUM

プレミアム
マイクロカーボンカートリッジ
この小さな1本で
12,000リットルの水量を処理。

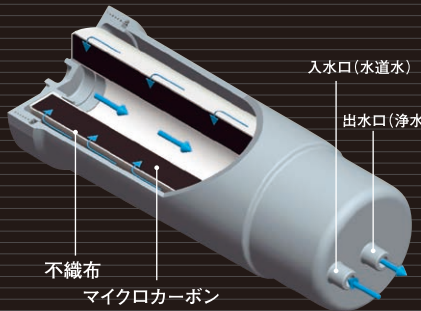

22物質を除去！

超微細な活性炭（マイクロカーボン）と不織布が溶解物質をスピーディに吸着し、22物質しっかり取り除きます。しかも目詰まりしにくく、水が流れやすいのが特長です。マイクロカーボン部分は環境にやさしいエコ素材【ヤシ殻】を使用しています。

■浄水能力


除去対象物質	
1	遊離残留塩素
2	濁り
3	クロロホルム
4	ブロモジクロロメタン
5	ジブロモクロロメタン
6	ブロモホルム
7	テトラクロロエチレン
8	トリクロロエチレン
9	総トリハロメタン ※1
10	CAT(農薬) ※2
11	2-MIB(カビ臭) ※3
12	溶解性鉛
13	1,2-DCE ※4
14	ベンゼン
15	ジェオスミン(カビ臭)
16	陰イオン界面活性剤
17	フェノール類
18	PFOS及びPFOA ※5、※6
19	鉄(溶解性) ※6
20	鉄(微粒子状) ※6
21	溶解性マンガン ※6
22	アルミニウム(中性) ※6

※1 クロロホルム、ブロモホルム、ジブロモホルム、テトラブロモホルムの4物質の総称です。
※2 2,4-D、2,4,5-T、2,4,6-T、2,4,5,6-Tの別名で、農薬の一種です。
※3 2-MIBはカビ臭の略称で、水道水の臭い原因物質の一つです。
※4 1,2-DCEはジクロロエチレンおよび1,1,2,2-ジクロロエチレンの略称です。
※5 有機フッ素化合物(PFAS)の一種です。
※6 浄水器協会(JMPA)で定められた規格基準(JMPASB基準)による物質です。

■浄水カートリッジの交換時期目安約12か月(1日約32リットルの使用で交換時期をお知らせ)※7
総使用量は約12,000リットル

※7 使用水量・水質・水圧によって交換時期が大幅に短くなることがあります。また、総使用量12,000リットル未満の場合でも12か月を経過すると交換をお知らせします。

交換用浄水カートリッジ

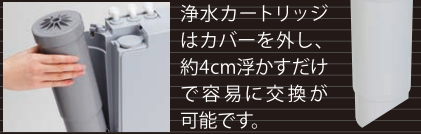

プレミアムマイクロカーボンUMSα
カートリッジ標準価格(税込) **¥14,850**



トリムの優れた整水技術が
美しいインテリアになりました。

コンパクトなアンダーシンク内蔵型本体、
しかも整水湯水一体型水栓です。

奥行きわずか10センチ、高さも32.9センチの
本体なのでシンク下にすっぽり収納。しかも
いまお使いの水道ラインをそのまま使用しま
すので、別に専用水栓を取り付ける必要があ
りません。カートリッジの交換時期が来ると、
水栓の液晶パネルとともに本体スイッチの
カートリッジリセット
ランプも点滅してお
知らせします。




カートリッジにはNSF認証取得の
活性炭を使用しています。

当社のプレミアムマイクロカーボンUMSαカ
ートリッジは、NSF認証を取得した活性炭(当
社共同開発)を使用しています。
【NSF認証活性炭メーカー/品番】
・株式会社クラレ/T-SO 60/150THM
・フタムラ化学株式会社/CN8200G
マイクロカーボンは内部に無数の微細孔をも
つ多孔性の炭素物質で、22物質をしっかり
取り除きます。

NSF認証とは
世界的に認められた公衆安全衛生に係わる非
営利機関であるNSFインターナショナルが制定
した公衆安全衛生に関わる規格であり、認証に
は厳しい試験をクリアしなければなりません。

ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式で
安定した電解能力を持続します。

グラシアは水を電気分解して電解水素水を生
成しますが、生成時に水の中に含まれるミネ
ラル等が電極板に引き寄せられます。このミ
ネラルがメッキ状態(スケール)になり電極
板に付着すると、電解能力が低下してしま
います。グラシアは定期的に電極と水路を
切り換える独自の「ダブル・オートチェ
ンジ・クロスライン方式」によって、電極
にスケールが付着するのを防ぎ、安定した
電解能力を持続することを可能にしました。

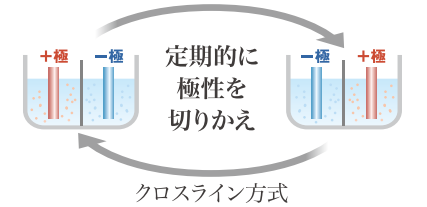

シャワーヘッドにシャワー切替ツマミを
装備しています。

ストレートからシャワーに
切り替えます。



1分間に最大4リットルの
電解水素水を生成。

定格電流AC4.5Aと容量を大きくしています
ので、1分間に最大4リットルの電解水素水
が取水できます。

※本体入水圧(動水圧)160kPa

セーフティバルブ機能、
水漏れセンサーによる安全性。


本体内部の水道圧の異常を感じるとセーフ
ティバルブ機能が働きます。また、万一本
体より水漏れが発生した場合には、水漏
れセンサーが感知して、強制的に止水す
る安全装置が装備されています。

主な仕様

- 医療機器製造販売認証番号:224AGBZX00024000
- 定格電圧:AC100V
- 定格周波数:50-60Hz
- 定格電流:AC4.5A
- 定格電解電圧:DC50V(max.)
- 消費電力:約270W(待機時約0.9W)
- 電解槽:4槽(8セル)
- 電極(枚数):プラチナコーティング電極(5枚)
- 電極耐久時間:電解時間として1400時間
(使用量・水質等の使用条件によって異なります。)
- 生成水取水方式:専用水栓方式
- 定格取水量:電解水素水約4リットル/分(max.)
酸性水約4リットル/分(max.) 浄水約5リットル/分(max.)
- 使用可能配管水圧:50kPa(最低動作水圧)~700kPa
- 本体重量:約5kg
- 電源コード長:約1.0m(アース線付き)
- 本体寸法:310(W)×329(H)×100(D)mm
- 水栓寸法:178(W)×332(H)×294(D)mm
- 電解槽洗浄方式:ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
- 電源回路:スイッチング・レギュレーター方式
- 本体保護機能:ヒューズ(基板内蔵):8A、水栓定流量弁、
安全逃がし弁(過大水圧防止)、定電流制御回路(過電
流防止装置)、過熱防止装置、水漏れセンサー
- 本体(水栓を含む)給水器具等認証登録番号:
W074-20037-227

※掲載の製品の色は印刷ですので、実際の色と異なる場合があります。
※製品の定格及びデザイン改良等のため予告なく変更する場合があります。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。
※お買い上げの前に販売店にご相談ください。

製品寸法

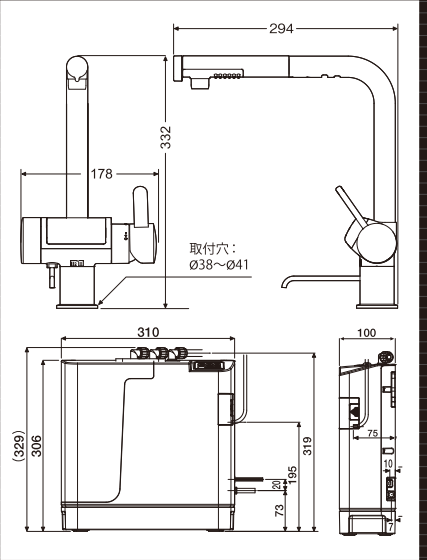

寸法、詳細等につきましては、設置前に必ず販売店に
ご確認、ご相談ください。

本体
標準価格(税込) **¥437,800**
取付工事費別

付属品



水栓本体・取水パイプ・シャワーホース・逆止弁付ジョイント
(2個)・ウォッシュシャワーヘッド・接続ユニット・クイック
ファスナー保護キャップ付(3個)・クイックファスナー・電
磁弁用・電磁弁・おもりストッパー・pH測定キット(専用
カップ、pH測定液、pH比色紙表)・電解水素水ホース(青)
・入水ホース(黄)

安全上のご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。 ●35℃を超えるお湯を本体側に通さないでください。 ●pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しないでください。 ●次のような水は飲用しないでください。(1)酸性水、(2)排水パイプ(パイプ小)から出る水、(3)pH測定液が入った水 ●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。 ●次の方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。(1)医師の治療を受けている方、(2)腎臓に障害がある方、(3)身体に異常を感じている方 ●電解水素水を飲んで身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談してください。 ●次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。(1)肌の弱い方、(2)アレルギー体質の方 ●酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。 ●飲用にはpH9.5前後(pH9.0～pH10未満)をおすすめしますが、初めて飲用する方は水素水レベル1で少量から飲用してください。 ●電解水素水は、1日当たり500～1000ミリリットルを目安に飲用してください。 ●生成水は生成後なるべく早く使用してください。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

(社)日本経済団体連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事

(社)日本病院会会員 (社)日本ホームヘルス機器協会正会員

～ 水 を 科 学 す る ～

東証プライム

株式会社日本トリム

(証券コード: 6788)

本社 / 〒530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービスENT オフィスタワー22F
TEL.06-6456-4600(代)

支社 / 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <https://www.nihon-trim.co.jp/>

■製造販売元

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
〒783-0060 高知県南国市螢が丘1-5-2



お求め、お問い合わせは